

Instructies voor asap TV-adapter (standaard/kort/HD)



! Lees deze instructies zorgvuldig door en volg ze op!

! asap TV-adapters mogen uitsluitend worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg.

! asap TV-adapters zijn gemaakt volgens de hoogste kwaliteitsnormen. U dient er zeer zorgvuldig mee om te gaan.

! De TV-adapter kan worden beschadigd of vernield door mechanische stress die is veroorzaakt door de adapter te laten vallen of er tegenaan te stoten enz.

! Verkeerd gebruik kan resulteren in infecties en uw patiënt letsel toebrengen of uw TV-adapter beschadigen.

Productbeschrijving

asap TV-adapters zijn optische precisie-hulpmiddelen die zijn ontworpen voor gebruik bij endoscopische toepassingen.

Er zijn verschillende versies verkrijgbaar. Controleer of u de juiste instructies voor uw hulpmiddel hebt.

Accessoires (niet meegeleverd)

asap TV-adapters werken alleen met een camerakop, camera en monitor.

Beoogd gebruik

De asap TV-adapters zijn ervoor bestemd om het endoscopische beeld van de binnenkant van het lichaam met dioptrie-compensatie via een camera over te brengen van de (multiscope) endoscoop naar een monitor.

Indicaties voor gebruik

De asap TV-adapters zijn bestemd voor gebruik samen met de asap (multiscope) endoscopen evenals andere (multiscope) endoscopen met een standaard oculair waarbij een verbeterde visualisatie wordt gewenst middels overdracht naar een TV-monitor.

Contra-indicaties

Er is geen specifieke contra-indicatie van toepassing op de asap TV-adapters.


Vóór gebruik

Bewaar uw asap TV-adapter in de originele verpakking. Bewaar hem, beschermd tegen vallen, op kamertemperatuur op een droge plek.

! Niet gebruiken als verpakking is beschadigd.

Controleer uw asap TV-adapter om er zeker van te zijn dat hij geschikt is en onbeschadigd. Volg vervolgens de instructies voor reiniging/desinfectie.

Installatie

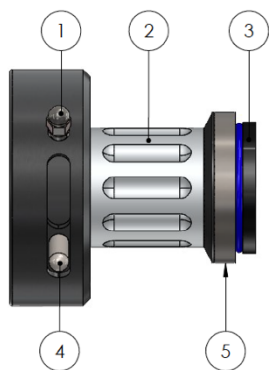

- 1) Borgschroef
- 2) Focuseringsring, aanpassing van beeldscherpte
- 3) C-mount schroefdraad

- 4) Vergrendel-/ontgrendelpen
- 5) Markering

Schroef uw asap TV-adapter op de camerakop met behulp van de C-mount schroefdraad (3). Bij uw asap TV-adapter wordt een borgschroef (1) meegeleverd. Telkens vóór gebruik van de asap TV-adapter moet u zich ervan verzekeren dat de borgschroef echt open is (→ de schroef is niet te zien in de onderkant van de adapter), anders wordt het oculair van de endoscoop beschadigd.

De pen (4) vergrendelt/ontgrendelt de endoscoopsteun via een kogelvergrendeling. Terwijl u de ontgrendelpen (4) vasthoudt, brengt u voorzichtig het oculair met de endoscoop naar binnen. Laat de pen los, verzeker u ervan dat de pen in zijn uitgangspositie staat en controleer of de endoscoop correct is gekoppeld.

Draai nu voorzichtig de borgschroef (1) tot de endoscoop in die positie is vergrendeld.

De beeldscherpte kan via de focuseringsring (2) worden aangepast. Aan de markering (5) op het hulpmiddel kunt u de specifieke brandpuntsafstand zien die de kijkhoek bepaalt van de beelden die u gaat ontvangen.

! Controleer vóór gebruik de correcte visualisatie.

! Doe een beschermhoes om de TV-adapter om kruisbesmetting te vermijden.

Demontage

Na gebruik van de endoscoop moet eerst de borgschroef (1) worden losgedraaid, zodat het oculair van de endoscoop niet wordt beschadigd. Duw vervolgens op de ontgrendelpen (4); nu kan de endoscoop gemakkelijk worden verwijderd. Schroef (3) daarna uw asap TV-adapter los van de camerakop.

Reiniging/desinfectie

! asap TV-adapters mogen absoluut niet thermisch gereinigd of gedesinfecteerd worden in wasmachine/desinfectieapparaat of autoclaaf. Ook mogen ze niet in een ultrasoon bad worden gereinigd.

! Om kruisbesmetting te vermijden, mag uw asap TV-adapter nooit samen met andere apparatuur en instrumenten worden vervoerd/gereinigd/gedesinfecteerd. Ze mogen alleen in dezelfde bak worden vervoerd/gereinigd/gedesinfecteerd, als alle hulpmiddelen/instrumenten afzonderlijk vastgezet zijn en niet met elkaar in aanraking komen.

1. Spoel de TV-adapter direct na gebruik ten minste 1 minuut lang met koud kraanwater om verontreinigingen te verwijderen.
2. Controleer visueel of de verontreinigingen zijn verwijderd. Als verontreinigingen niet verdwijnen, verleng dan de spoeltijd of gebruik een geschikt doekje voor optische medische hulpmiddelen.
3. Leg de adapter in een reinigings- en desinfectie-oplossing. Gebruik in de handel verkrijgbare middelen voor thermolabele instrumenten, bijv. neodisher Endo® MED; 15 g/l (1,5%), 5 min (20 °C). Denk eraan dat uw asap TV-adapter onderdelen bevat die zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium.
4. Veeg de TV-adapter onder koud kraanwater of (bij voorkeur) gedestilleerd water ten minste 1 minuut lang af met een spons of zachte doek. Zorg ervoor dat bedekte oppervlakken op beweegbare delen kunnen worden afgespoeld (1)(2)(4).

5. Controleer visueel of alle residuen zijn verwijderd.
6. Droog alle onderdelen met een zachte, pluivrije doek. Overtuig u ervan dat bedekte oppervlakken op beweegbare delen droog zijn (1)(2)(4).
7. Reinig de optische lenzen aan de boven- en onderkant van de TV-adapter met in zuivere alcohol gedrenkte, schone wattenstaafjes. Laat geen stof of vlekjes achter, want dit kan het beeld negatief beïnvloeden.

Controlepunten

Controleer visueel op mogelijke beschadiging, slijtage of verontreiniging. Vervang het hulpmiddel indien nodig.

Vervoer en opslag

Vervoer en bewaar de asap TV-adapter in een schone, afgesloten, luchtdichte omgeving op kamertemperatuur.

Beperkingen bij verwerking

asap TV-adapters zijn gevalideerd voor 250 verwerkingscycli.

Reparatie en vervanging

Als u problemen hebt met uw asap TV-adapter, neem dan contact op met het servicecentrum voor reparatie of met uw erkende dealer voor vervanging. TV-adapters mogen uitsluitend worden teruggestuurd met een schriftelijke verklaring dat ze gereinigd en gedesinfecteerd zijn.

Opmerking! asap raadt ten eerste af om gebruik te maken van een niet-erkend servicebedrijf of service-organisatie voor het uitvoeren van service en reparatie bij asap producten. Stuur voor service of reparatie alle producten op naar asap.

Afvalverwijdering

asap TV-adapters kunnen samen met gewoon ziekenhuisafval in overeenstemming met de nieuwste hygiëne-eisen worden afgevoerd. Nationale wetten en voorschriften dienen ook te worden nageleefd.

Niet te repareren asap TV-adapters kunnen voor afvoer worden teruggestuurd naar de fabrikant in een goedgekeurde verpakking met een schriftelijke verklaring dat ze zijn gereinigd/gedesinfecteerd.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw erkende dealer.

Markeringen

Naam, serienummer, f=brandpuntsafstand, inweekbaar (=onderdompelbaar), UDI-drager en CE-markering.

Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

asap endoscopic products GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of gevolgschade door veronachtzaming van de instructies, verkeerd hanteren of verkeerd gebruik van asap TV-adapters.



asap endoscopic products GmbH
Stöckmatten 19
79224 Umkirch – Duitsland
Tel: +49 (0)7665 / 94 773-0
E-mail: info@asap-gmbh.de



Instructies voor asap TV-adapter (standaard/kort/HD)



Gebruikte symbolen

Label symbol	Omschrijving
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Naam medisch hulpmiddel
	CE-markering, het hulpmiddel voldoet aan de richtlijn (EU) 2017/745
	Niet gebruiken als verpakking is beschadigd
	Waarschuwing
	Gebruiksaanwijzing lezen
	Herbruikbaar
	Fabrikant
	Niet-steriel
	Voorzichtig, breekbaar
	LET OP: volgens de Amerikaanse wet mag dit hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of in opdracht van een arts.