

Brugsanvisning til asap TV Adapter (angled)



- Læs venligst denne brugsanvisning grundigt igennem, og overhold den!
- asap TV-Adapter må kun anvendes af faguddannet medicinsk personale.
- asap TV-Adapter overholder de højeste kvalitetsstandarder. Den skal altid håndteres forsigtigt.
- Mekanisk påvirkning på grund af stød eller slag kan føre til, at asap TV-Adapter bliver beskadiget eller ødelagt.

Forkert brug kan føre til infektioner og skader på patienten eller til skader på TV-Adapteren.

Beskrivelse af produktet

asap TV-Adapter er et optisk præcisionsinstrument, som er beregnet til anvendelse i forbindelse med endoskoper. Der findes forskellige varianter. Kontrollér, at du anvender den korrekte vejledning til dit produkt.

Tilbehør (ikke standardudstyr)

asap TV-Adapter kan kun anvendes sammen med kamerahoved, kamera og monitor.

Formål

asap TV-Adapter gør det muligt at visualisere kroppen indvendigt endoskopisk ved hjælp af endoskopets/multiskopets dioptriudligning fra kamera til skærm.

Tilsluttet anvendelse

asap TV-Adapter er beregnet til anvendelse med asap endoskoper/multiskoper samt andre endoskoper/multiskoper med standardokular for at muliggøre udvidet visualisering med TV-skærm.

Kontraindikationer

Der er ingen specifikke kontraindikationer for asap TV-Adapteren.

Før anvendelse


asap TV-Adapteren skal opbevares i originalemballagen. Adapteren skal opbevares ved rumtemperatur et tørt sted, hvor den er beskyttet mod at falde ned.



TV-Adapteren må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.

Kontrollér asap TV-Adapteren for funktionsdygtighed og eventuelle skader. Følg derefter rengørings-/desinfektionsvejledningen.

Installation

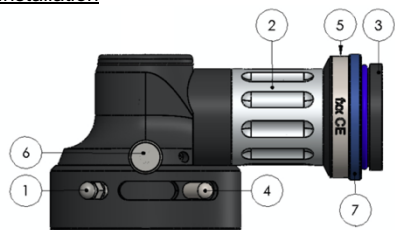

- 1) Låseskrue
- 2) Fokusskrue, indstilling af billedets skarphed
- 3) C-Mount-gevind
- 4) Låse-/oplåsningsstift
- 5) Mærkning
- 6) Låseskrue til rotation
- 7) Kontramøtrik

Skrue asap TV-Adapter på kamerahovedet ved hjælp af C-Mount-gevindet (3). asap TV-Adapteren er udstyret med en låseskrue (1). Kontrollér før hver brug, at låseskruen er åben (→ skruen på underside kan ikke ses), da endoskopokularet ellers vil tage skade. Stiften (4) låser/oplåser endoskopholderen via en kugletrykås. Indsæt forsigtigt endoskopet med tilbageholdt oplåsningsstift. Slip stiften igen, og kontrollér, at stiften er i sin oprindelige position, og at endoskopet er i korrekt indgreb. Drej nu forsigtigt låseskruen (1), indtil endoskopet er fastlåst i positionen. Rotationen kan også fikseres om ønsket (6). Anvend

kontramøtrikken (7) til at indstille kameraets vinkel. Billedets skarphed kan indstilles ved hjælp af fokusskruen (2). Instrumentets specifikke brændvidde kan ses på mærkningen (5), og denne bestemmer billedets synsvinkel.

- Kontrollér før anvendelsen, at billedet er korrekt.
- Anvend et overtræk omkring TV-Adapteren, således at krydskontaminering undgås.

Afmontering

Efter anvendelse skal låseskruen (1) løsnes først for ikke at beskadige endoskopokularet. Aktivér oplåsningsstiften (4); nu kan endoskopet let tages af. Skru (3) asap TV-Adapteren af kamerahovedet.

Rengøring/desinfektion

asap TV-Adapteren må under ingen omstændigheder rengøres termisk eller maskinelt eller autoklaveres. Rengøring i ultralydsbad er heller ikke tilladt.

For at undgå krydskontaminering og beskadigelse må asap TV-Adapter aldrig transporteres/rengøres/desinficeres sammen med andre apparater og instrumenter. Den må kun transporteres/rengøres/desinficeres i den samme beholder, når alle apparater/instrumenter er fastgjort individuelt og ikke er i kontakt med hinanden.

1. Skyl straks efter brug TV-Adapteren med koldt vand fra hanen for at fjerne urenheder.
2. Kontrollér derefter visuelt, om alle urenheder er fjernet. Hvis snavset ikke kan løsnes, skal skylletiden forlænges, eller du kan anvende en klud, som er egnet til optisk medicinsk udstyr.
3. Læg derefter adapteren i en rengørings- og desinfektionsopløsning. Anvend midler til termolabile instrumenter, f.eks. neodisher Endo® MED; 15 g/l (1,5 %), 5 min (20 °C). Vær opmærksom på, at TV-Adapteren indeholder dele af eloxeret aluminium.
4. Tør TV-Adapteren af under koldt vand fra hanen eller (helst) destilleret vand med en svamp eller en blød klud i mindst 1 minut. Sørg for at skylle vanskeligt tilgængelige steder (1)(2)(4)(6)(7).
5. Kontrollér visuelt, at alt tilbageværende snavs er fjernet.
6. Tør alle dele med en blød, fnugfri klud. Kontrollér, at vanskeligt tilgængelige steder er tørre (1)(2)(4)(6)(7).
7. Rengør glasoptikken på over- og undersiden af TV-Adapteren med en ren vatpind med ren alkohol. Der må ikke efterlades støv eller pletter, som kan påvirke billedet negativt.

Kontrolpunkter/kontrol

Visuel kontrol for skader, slitage eller snavs. Udskift om nødvendigt apparatet.

Transport og opbevaring

asap TV-Adapteren skal transporteres og opbevares i rene omgivelser ved rumtemperatur.

Begrænsninger af anvendelsen

asap TV-Adapteren er valideret til 250 oparbejdningscyklusser.

Reparation og udskiftning

Hvis der er problemer med asap TV-Adapteren, skal du kontakte kundeservice for reparation eller forhandleren med henblik på udskiftning. TV-Adapteren må kun returneres i rengjort/desinficeret stand og med skriftlig dokumentation.

Bemærk! asap fraråder kraftigt at henvende sig til ikke-autoriserede servicevirksomheder eller -organisationer med henblik på reparation. Indsend venligst alle produkter til service eller reparation hos asap.

Bortskaffelse

asap-TV-Adapteren kan bortskaffes sammen med almindeligt klinikaffald, såfremt de gældende hygiejnekrav overholdes. Lokale love og regler skal i den forbindelse overholdes.

asap TV-Adaptorer, som ikke kan repareres, kan returneres til producenten i rengjort/desinficeret stand og med skriftlig dokumentation i frankeret emballage.

Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du henvende dig til forhandleren.

Mærkning

Navn, serienummer, f=brændvidde, soakable (=kan lægges i blød), UDI-databærer og CE-mærke.Pouzítě symboly

Anvendte symboler

Mærkatssymbol	Betegnelse
	Katalognummer
	Serienummer
	Fremstillingsdato
	Mærket som medicinsk udstyr
	CE-mærke, apparatet overholder forordning (EU) 2017/745
	TV-Adapteren må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget
	Advarsel
	Følg brugsanvisningen
	Genanvendelig
	Fabrikant
	Ikke-steril
	Skrøbelig, skal håndteres forsigtigt
	BEMÆRK: I henhold til lovgivningen i USA må dette apparat kun sælges af eller efter ordination fra en læge

Alle alvorlige uønskede hændelser i forbindelse med apparatet skal indberettes til producenten og de kompetente myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehørende.

asap endoscopic products GmbH påtager sig intet ansvar for skader eller følgeskader, der skyldes manglende overholdelse af anvisninger, forkert betjening eller brug af asap TV-Adaptorer.



asap endoscopic products GmbH
Stöckmatten 19
79224 Umkirch – Tyskland
Tlf.: +49 (0)7665/94 773-0
E-mail: info@asap-gmbh.de

