






Gebruiksaanwijzing voor asap TV Adapter (angled)

-  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en leef deze na!
-  asap TV-adapters mogen uitsluitend door medisch geschoold personeel worden gebruikt.
-  asap TV-adapters voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Behandel ze altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
-  Mechanische belasting door vallen of stoten kan resulteren in beschadigingen of vernieling.
-  Verkeerd gebruik kan resulteren in infecties en schadelijk zijn voor uw patiënten of de TV-adapter beschadigen.

Productbeschrijving

asap TV-adapters zijn optische precisie-instrumenten die zijn ontworpen voor gebruik bij endoscopische toepassingen. Er zijn diverse varianten verkrijgbaar. Overtuig u ervan dat de juiste handleiding voor uw product beschikbaar is.

Toebehoren (niet-standaard)

asap TV-adapters kunnen alleen met camerakop, camera en monitor worden gebruikt.

Gebruiksdoeleinde

asap TV-adapters maken het mogelijk om met dioptrie-compensatie van de endoscoop/multiscoop het binnenste van het lichaam van camera naar monitor endoscopisch weer te geven.

Beoogd gebruik


asap TV-adapters zijn voorzien voor gebruik samen met asap endoscopen/multiscopen evenals andere endoscopen/multiscopen met standaard oculairtrechter om een uitgebreide visualisatie met een TV-monitor mogelijk te maken.

Contra-indicaties


Voor asap TV-adapters gelden geen specifieke contra-indicaties.

Vóór gebruik

Bewaar uw asap TV-adapter in de originele verpakking. Bewaar de adapter bij kamertemperatuur op een droge plek waar deze niet kan vallen.

 Gebruik de TV-adapter niet wanneer de verpakking beschadigd is. Controleer uw asap TV-adapter op bruikbaarheid en mogelijke schades. Volg dan de instructies voor reiniging/desinfectie op.

Installatie

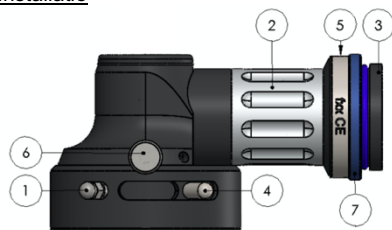



- 1) Vastzetschroef
- 2) Focuseeraandrijving, instellen van de beeldscherpte
- 3) C-Mount-schroefdraad
- 4) Ver-/ontgrendelingspen
- 5) Aanduiding
- 6) Vastzetschroef voor rotatie
- 7) Borgmoer

Schroef uw asap TV-adapter via de C-Mount-schroefdraad (3) op de camerakop. Uw asap TV-adapter is voorzien van een vastzetschroef (1). Let er vóór elk gebruik op dat de vastzetschroef werkelijk geopend is (→ schroef aan de onderkant niet te zien), omdat anders de oculairtrechter van de endoscoop wordt beschadigd. De pen (4) ver-/ontgrendelt de endoscoophouder via een kogelsnapslot. Zet de endoscoop er met vastgehouden ontgrendelingspen voorzichtig in. Laat de pen weer los en controleer of de pen zich in zijn

oorspronkelijke positie bevindt en of de endoscoop juist vastgeklikt is. Draai nu voorzichtig aan de vastzetschroef (1) tot de endoscoop in positie is vergrendeld. Als optie kan de rotatie worden vastgezet (6). Gebruik de borgmoer (7) om de hoek ten opzichte van de camera in te stellen.


De beeldscherpte kan door de focusseeraandrijving worden ingesteld (2). De specifieke brandpuntsafstand van het instrument kan worden afgelezen op de aanduiding (5), deze bepaalt de gezichtshoek van het beeld.


-  Controleer vóór gebruik de correcte beeldvorming.
-  Gebruik een beschermhoes om de TV-adapter, zodat kruisbesmettingen worden vermeden.

Demontage

Na gebruik draait u eerst de vastzetschroef (1) los om de oculairtrechter van de endoscoop niet te beschadigen. Bedien de ontgrendelingspen (4); nu kan de endoscoop gemakkelijk worden weggenomen. Schroef (3) de asap TV-adapter van de camerakop af.

Reiniging/desinfectie

 In geen geval mogen asap TV-adapters thermisch gereinigd of machinaal gedesinfecteerd of geautoclaveerd worden. Ze mogen ook niet in een ultrasoonbad worden gereinigd.

 Om kruisbesmetting en beschadiging te vermijden transporteert/reinigt/desinfecteert u uw asap TV-adapter nooit samen met andere apparaten en instrumenten. Ze mogen alleen in dezelfde bak worden getransporteerd/gereinigd/gedesinfecteerd, wanneer elk apparaat/instrument afzonderlijk is bevestigd en er geen onderling contact is.

1. Spoel de TV-adapter direct na gebruik met koud leidingwater af om vervuilingen te verwijderen.
2. Controleer visueel of de vervuilingen zijn verwijderd. Mocht de vervuiling niet loslaten, verleng dan de spoeltijd of gebruik een geschikte doek voor het afvegen van optische medische hulpmiddelen.
3. Leg de TV-adapter in een reinigings- en desinfectie-oplossing. Gebruik van in de vakhandel verkrijgbare middelen voor thermolabele instrumenten, bijv. neodisher Endo® MED; 15 g/l (1,5%), 5 min (20 °C). Denk eraan dat uw TV-adapter onderdelen van geanodiseerd aluminium bevat.
4. Veeg de TV-adapter onder koud leidingwater of (bij voorkeur) gedestilleerd water met een spons of zachte doek minimaal 1 minuut lang af. Zorg ervoor dat verborgen vlakken worden gespoeld (1)(2)(4)(6)(7).
5. Controleer visueel of alle resten zijn verwijderd.
6. Droog alle onderdelen met een zachte, pluivrije doek. Zorg ervoor dat verborgen vlakken worden gedroogd (1)(2)(4)(6)(7).
7. Reinig de optische glazen aan boven- en onderkant van de TV-adapter met behulp van schone wattenstaafjes met zuivere alcohol. Laat geen stof of vlekken achter, waardoor het beeld negatief zou kunnen worden beïnvloed.

Controlepunten/onderzoek

Visuele controle op mogelijke schades, slijtage of vervuiling. Vervang indien nodig het instrument.

Transport en opslag

Transporteer en bewaar de asap TV-adapter in een schone luchtdichte omgeving op kamertemperatuur.

Beperkingen bij het gebruik

asap TV-adapters zijn gevalideerd voor 250

herververwerkingscycli.

Reparatie en vervanging

Indien u problemen hebt met uw asap TV-adapter, neem dan contact op met de klantenservice voor reparatie of uw eigen vertrouwde distributeur voor vervanging. Retourzending van TV-adapters is alleen in gereinigde/gedesinfecteerde toestand met schriftelijk bewijs toegestaan.

Aanwijzing! asap raadt ten zeerste af om voor reparatiediensten gebruik te maken van niet geautoriseerde servicebedrijven of service-organisaties. Stuur voor onderhoud of reparatie alle producten terug naar asap.

Afvoer

asap TV-adapters kunnen met inachtneming van de geldende hygiëne-eisen bij het normale ziekenhuisafval worden afgevoerd. Daarbij moeten de toepasselijke landspecifieke wetten en richtlijnen in acht worden genomen.


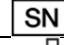








asap TV-adapters die niet kunnen worden gerepareerd, kunnen in gereinigde/gedesinfecteerde toestand met schriftelijk bewijs in een gefrankeerd pakket worden teruggestuurd naar de fabrikant om te worden afgevoerd.

Als u verder nog vragen hebt, kunt u zich wenden tot uw eigen vertrouwde distributeur.

Etiket

Naam, serienummer, f=brandpuntsafstand, soakable (=inweekbaar), UDI-informatiedrager en CE-symbool.

Gebruikte symbolen

Etiket symbool	Omschrijving
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Omschrijving medisch hulpmiddel
	CE-markering, het hulpmiddel voldoet aan verordening (EU) 2017/745
	Gebruik de TV-adapter niet wanneer de verpakking beschadigd is
	Waarschuwing
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Herbruikbaar
	Fabrikant
	Niet-steriel
	Breekbaar, voorzichtig behandelen
	LET OP: verkoop van of uitschrijving van een recept voor dit hulpmiddel door een arts valt onder de beperkingen van de Amerikaanse federale wetgeving

Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt zijn/is gevestigd.

asap endoscopic products GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die is veroorzaakt door het negeren van instructies, oneigenlijke toepassing of verkeerd gebruik van asap TV-adapters.



asap endoscopic products GmbH
Stöckmatten 19
79224 Umkirch – Germany
Tel: +49 (0)7665 / 94 773-0
E-mail: info@asap-gmbh.de

