






Bruksanvisning för asap tv-adapter (vinklad)

-  Läs igenom och beakta informationen i den här bruksanvisningen noggrant!
-  asap tv-adaptrar får endast användas av kvalificerad vårdpersonal.
-  asap tv-adaptrar uppfyller högsta kvalitetsstandarder. Hantera dem alltid med största omsorg.
-  Mekaniska påfrestningar till följd av fall eller stötar kan leda till att produkten skadas eller går sönder.
-  Felaktig användning kan leda till infektion och skada på patienterna eller till skada på tv-adaptern.

Produktbeskrivning

asap tv-adaptrar är optiska precisionsenheter som är utformade för användning i endoskopiska tillämpningar. De erbjuds i olika varianter. Se till att du har rätt bruksanvisning för din produkt.

Tillbehör (ej standard)

asap tv-adaptrar kan endast användas tillsammans med kamerahuvud, kamera och monitor.

Avsett ändamål

asap tv-adaptrar möjliggör endoskopisk avbildning av kroppens inre med dioptrijjustering av endoskopet/multiskopet från kamera till monitor.

Avsedd användning


asap tv-adaptrar är utformade för att användas tillsammans med asap endoskop/multiskop samt andra endoskop/multiskop med standardokular för att möjliggöra avancerad visualisering med tv-monitor.

Kontraindikationer

Det finns inga specifika kontraindikationer för asap tv-adaptrar.


Inför användning

Förvara din asap tv-adapter i originalförpackningen. Förvara adaptorn i rumstemperatur på en torr plats där den inte kan falla ned.

-  Använd inte tv-adaptern om förpackningen är skadad.

Kontrollera att din asap tv-adapter fungerar som den ska och inte är skadad. Följ därefter anvisningarna för rengöring/desinficering.

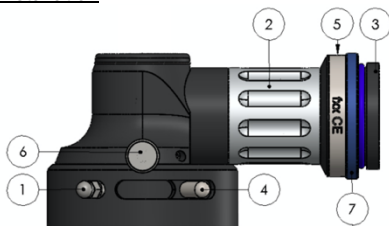

Installation



- 1) Fästskruv
- 2) Fokusenhet, justering av bildskärpan
- 3) C-Mount-gånga
- 4) Lås-/upplåsningsstift
- 5) Märkning
- 6) Fästskruv för rotation
- 7) Kontramutter

Skruva fast din asap tv-adapter på kamerahuvudet med C-Mount-gången (3). Din asap tv-adapter är utrustad med en fästskruv (1). Se inför varje användning till att fästskruven är helt öppen (→ skruven syns inte på undersidan), eftersom endoskopets okular annars tar skada. Stiftet (4) låser/låser upp endoskopfästet med ett kulsnappe. Sätt försiktigt in endoskopet samtidigt som upplåsningsstiftet hålls fast. Släpp stiftet igen och kontrollera att det är i ursprungsläget och


att endoskopet är ordentligt inkopplat. Vrid nu försiktigt fästskruven (1) tills endoskopet låser fast i detta läge. Alternativt kan rotationen fixeras (6). Använd kontramuttern (7) för att justera vinkeln mot kameran. Bildens skärpa kan ställas in med fokusenheten (2). Enhetens specifika brännvidd anges på märkningen (5), denna bestämmer bildens blickvinkel.


-  Kontrollera att avbildningen är korrekt inför användning.
-  Använd ett skyddshölje runt tv-adaptern för att förhindra korskontaminering.

Demontering

Efter användning lossar du först fästskruven (1) för att undvika att skada endoskopets okular. Tryck på upplåsningsstiftet (4) så kan endoskopet enkelt tas bort. Skruva loss (3) asap tv-adapter från kamerahuvudet.

Rengöring/desinficering

-  asap tv-adaptrar får under inga omständigheter rengöras termiskt, desinficeras mekaniskt eller autoklaveras. De får heller inte rengöras i ultraljudsbad.

-  För att undvika korskontaminering och skador får asap tv-adapter aldrig transporteras/rengöras/desinficeras tillsammans med andra enheter och instrument. Transport/rengöring/desinficering i samma behållare får endast ske om varje enhet/instrument har fixerats separat och det inte finns någon kontakt mellan enheterna/instrumenten.

1. Skölj tv-adaptern omedelbart efter användning med kallt kranvatten för att avlägsna föroreningar.
2. Kontrollera visuellt att föroreningar har avlägsnats. Om det inte går att få bort smutsen ska du skölja enheten längre tid eller använd en lämplig torkduk för optiska medicintekniska produkter.
3. Placering i rengörings- och desinficeringslösning. Användning av gängse medel för termolabila instrument, t.ex. neodisher Endo® MED; 15 g/l (1,5 %), 5 min (20 °C). Observera att tv-adaptern innehåller delar av anodiserat aluminium.
4. Torka av tv-adaptern under kallt kranvatten eller (helst) destillerat vatten med en svamp eller mjuk trasa i minst 1 minut. Se till att även dolda ytor spolas (1)(2)(4)(6)(7).
5. Kontrollera visuellt att alla rester har avlägsnats.
6. Torka alla delar med en mjuk, luddfri trasa. Se till att även dolda ytor torkas (1)(2)(4)(6)(7).
7. Rengör de optiska glasen upptill och nedtill på tv-adaptern med rena bomullspinnar och ren alkohol. Lämna inte kvar damm eller fläckar som kan påverka bilden negativt.

Kontrollpunkter/inspektion

Visuell inspektion avseende skador, slitage eller smuts. Byt ut produkten vid behov.

Transport och förvaring

Transportera och förvara asap tv-adapter i en ren, lufttät miljö vid rumstemperatur.

Begränsningar av användningen

asap tv-adaptrar är godkända för 250 upparbetningscykler.

Reparation och byte

Om du har problem med din asap tv-adapter

kontakta du kundtjänst eller din auktoriserade återförsäljare för reparation. Tv-adaptrar får endast returneras i rengjort/desinficerat skick och med skriftligt intyg.

Obs! asap avråder med eftertryck att man låter obehöriga serviceföretag eller serviceorganisationer utföra reparationer på produkten. För underhåll eller reparation, returnera dina produkter till asap.

Bortskaffande

asap tv-adaptrar kan kasseras med normalt sjukhusavfall, med hänsyn till gällande hygienkrav. Beakta gällande nationella lagar och föreskrifter.

asap tv-adaptrar som inte kan repareras kan returneras till tillverkaren för avfallshantering i rengjort/desinficerat skick tillsammans med ett skriftligt intyg i en frakterad förpackning. Kontakta din återförsäljare vid frågor.

Märkning

Namn, serienummer, f=brännvidd, soakable (=iläggbar), UDI-lagringsmedium och CE-symbol.

Använda symboler

| Etikett symbol | Beteckning |
|---|--|
|  | Katalognummer |
|  | Serienummer |
|  | Tillverkningsdatum |
|  | Beteckning på medicinteknisk produkt |
|  | CE-märkning, enheten överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 |
|  | Använd inte tv-adaptern om förpackningen är skadad |
|  | Varning |
|  | Beakta bruksanvisningen |
|  | Kan återanvändas |
|  | Tillverkare |
|  | Icke-steril |
|  | Ömtålig, hanteras varsamt |
|  | OBSERVERA: Vid försäljning eller förskrivning av denna produkt genom läkare gäller restriktionerna i USA:s federala lag. |

Alla allvarliga tillbud som rör produkten ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i det land där användaren och/eller patienten är etablerad.

asap endoscopic products GmbH övertar inget ansvar för skador eller följdskador orsakade av bristande efterlevnad av instruktioner, felaktig hantering eller användning av asap tv-adaptrar.



asap endoscopic products GmbH
Stöckmatten 19
79224 Umkirch – Tyskland
Tel: +49 (0)76 65 94 773-0
E-post: info@asap-gmbh.de

